



MEDICONTUR E-IFU

Confidentiality Statement

This document contains confidential information, and as such may not be disclosed to 3rd party without the permission of Mediontur Ltd.
All rights reserved.

MEDICONTUR SISTEM INJECTARE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

MEDJET PIL-MA

RO

DESCRIERE

Conține un dispozitiv (injector) steril, de unică folosință pentru implantarea în ochi a lentilelor (LIO) foldabile hidrofiele "FLEX" preîncarcate. Componentele injectorului sunt: corpul injectorului, cartușul, opritor roșu și o tija piston cu vârf moale.

NOTĂ

Sistemul de injectare PIL-MA este folosit exclusiv pentru lentilele intraoculare preîncarcate MediconTur "FLEX". Cele două componente principale (LIO și injectorul) ale sistemului de injectare preîncărcat sunt ambalate și sterilizate separat. Înainte de utilizarea dispozitivului vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Modele

Model	LIO aplicabile	Mărime incizie corneană estimată
MEDJET PIL-MA	Bi-Flex 677P(M)(T)(Y)	2.2 mm
	Z-Flex 690P(M)(T)(Y)	
	Q-Flex 640P(M)(Y)	

AMBALAJ

Sistemul de injectare este ambalat într-un blister, sterilizat cu oxid de etilenă.

DATĂ EXPIRARE

Injectoarele MediconTur sunt sterile dacă ambalajul primar nu este deteriorat. A nu se utiliza după data expirării.

UTILIZARE

Injectoarele MediconTur PIL-MA sunt indicate a se utiliza pentru implantarea lentilelor preîncarcate hidrofiele "FLEX" în camera posterioară (sacul capsular), într-un ochi adult după îndepărtarea cristalinului natural.

CONTRAINDICAȚII

Nu sunt cunoscute contraindicații în utilizarea injectorului în timpul implantării lentilelor intraoculare.

ATENȚIONĂRI

- Citiți cu atenție etichetele de pe ambalaj pentru informații despre tipul lentilei, dioptrie și data expirării. A nu se utiliza după data de expirare.
- A nu se resteriliza prin nicio metodă și a nu se refolosi nici o componentă a injectorului.
- Nu folosiți sistemul dacă ambalajul este deteriorat sau umed, sterilitatea dispozitivului poate fi compromisă.
- Depozitați injectorul cu ambalajul nedesfăcut într-un loc uscat, ferit de umezeală și de razele directe ale soarelui, la temperatura camerei (15-35°C) și minimum 35% umiditate relativă.
- Pentru implantarea lentilei sunt necesare aptitudini chirurgicale ridicate. Pentru a implanta lentile intraoculare este necesar ca chirurgul să fi asistat/observat anterior la numeroase intervenții de acest gen și să fi absolvit unul sau mai multe cursuri de specialitate pe această temă.
- Pacienții trebuie informați că pentru posibilele evenimente neprevizibile poate fi necesar a se reintervenii chirurgical.

MOD DE UTILIZARE

1. Desfaceți ambalajul exterior pentru a scoate blisterul de protecție, verificați informațiile de pe blister dacă corespund cu cele de pe eticheta ambalajului exterior (ex. model, lot). În același timp asigurați-vă că injectorul preîncărcat Medicontur "FLEX" este cel corespunzător, nu este expirat și poate fi utilizat.
2. Desfaceți blisterul în mediu steril și scoateți sistemul de injectare. Pregăriți recipientul lentilei conform manualului de utilizare.

3. Pentru determinarea poziției corecte aliniați săgețile de pe opritorul roșu al injectorului și a recipientului lentilei intraoculare. Apăsăți în jos cu o mișcare fermă injectorul până auziți un clic așa cum este ilustrat în Fig. 1/a.

4. Trageți injectorul afară precum în Fig.1/b și verificați dacă suportul lentilei a fost încărcat în injector.

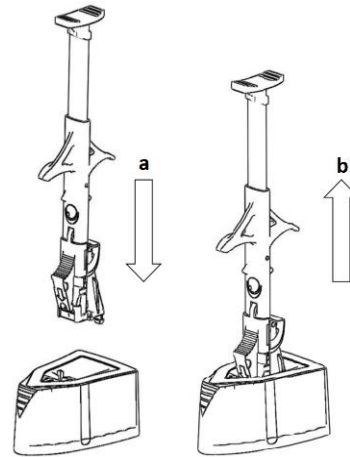


Fig. 1

5. Cu grijă eliberați vârful cartușului din cârlig. Asigurați-vă că vârful cartușului nu este deteriorat. Ridicați vârful cartușului cu 180° până se așează în poziția corectă așa cum este indicat în Fig. 2.

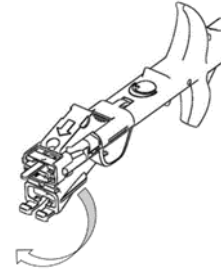


Fig. 2

6. Împingeți în față blocatorul roșu până auziți unui clic pentru a asigura vârful cartușului și a face posibilă avansarea tijei piston, precum în Fig. 3. A se evita apăsarea accidentală a tijei de injectare care este acum deblocată.

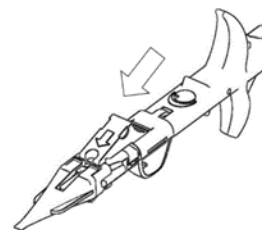


Fig. 3

7. În orificiul aflat în fața blocatorului roșu se introduce canula (23G sau mai mare) a seringii cu vâscoelastic. Injectați soluție vâscoelastică prin orificiu așa cum este indicat în Fig. 4. Este suficientă umplerea cartușului până la jumătatea cartușului.

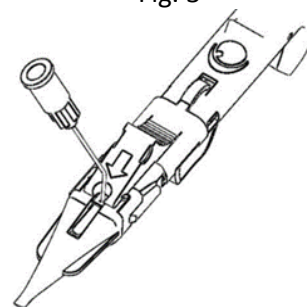


Fig. 4

8. Împingeți înainte pistonul lent într-un mod controlat. Luați în calcul o pornire mai greoaie a pistonului. O rezistență crescută poate indica o lentilă blocată.

9. Cu teșitura vârfului orientată în jos, injectați lentila aplicând o presiune continuă și ușoară pe piston.
10. Când lentila a ieșit din vârful cartușului, încetați apăsarea pistonului și extrageți cu grijă vârful cartușului din ochi.

NOTĂ

- Doar soluție salină echilibrată (BSS) poate fi utilizată ca lubrifiant.
- Când impingeți pistonul, o rezistență prea mare poate indica o lentilă blocată.
- Dacă lentila se blochează în injector, îndepățați și aruncați injectorul și lentila.
- A se arunca după utilizare.
- Produsul sau deșeurile sale trebuie dispuse în concordanță cu reglementările locale/naționale














OBLIGAȚII

Medicontur nu își asumă nici o responsabilitate pentru alegerea unui model necorespunzător, a manipulării improprii, folosirii, tehnicii chirurgicale aplicate sau oricărei erori iatrogene cauzate de către chirurg.

CARD PACIENT

Una dintre etichetele autoadezive aflate în cutia lentilei, pe care sunt imprimate datele lentilei, se lipește pe cardul pacientului, ce se găsește deasemenea în cutie. Cardul pacientului se înmânează pacientului pentru a se putea identifica cu ușurință tipul de lentilă implantată și chirurgul.

SIMBOLURI

 Certificat CE	 Depozitați la loc uscat	 Unică folosință
 Feriți de razele solare	 Citiți instrucțiunile de utilizare	 Nu resterilizați
 Numărul lotului	 Utilizați până la (data)	 Depozitați la temperatura camerei
 Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat	 Producător	 Nu congelați
 Sterilizat cu oxid de etilenă		

PRODUCĂTOR

Medicontur Engineering Ltd.
Str. Herceghalmi, H-2072
Zsámbék, UNGARIA
Telefon: +36 23 56 55 55
Fax: +36 23 56 55 56

Vă rugăm raportați orice eventuale probleme către departamentul de asigurare a calității Medicontur la adresa de e-mail: QA@medicontur.hu.

ULTIMA ACTUALIZARE March 2017

Acest document a fost redactat în limba engleză. În cazul unor incoerențe, versiunea în limba engleză va prevala.

Confidentiality Statement

This document contains confidential information, and as such may not be disclosed to 3rd party without the permission of Medicontur Ltd. All rights reserved.